

Dr. Beck Protocol Handleiding



Versie 1.0

Inhoudsopgave

Dr. Beck Protocol Handleiding.....	1
Inhoudsopgave.....	2
Inleiding.....	3
Het protocol.....	3
Wat zit er in de doos.....	4
Colloïdaal Zilvergenerator.....	5
Methode 1:.....	5
Methode 2:.....	6
Belangrijk:.....	6
Bloodpulse.....	7
Gebruik:.....	8
Veiligheid.....	11
Huidirritatie.....	11
Batterijgebruik.....	13
Vervangen van de batterij.....	13
Meer informatie en updates:.....	14

Inleiding

Bedankt voor het aanschaffen van de Dr. Beck Protocol Device. U heeft hiermee een uniek product waarmee u twee onderdelen van het Dr. Beck Protocol kunt toepassen: Het consumeren van colloïdaal zilverwater en het reinigen van het bloed middels BloodPulse technologie. De overige onderdelen van het protocol zijn: De magnetische pulser en het consumeren van geozoniseerd water. De magnetische pulser is los verkrijgbaar bij ons. Een ozongenerator kunt u kopen bij de betere (zee)aquarium speciaalzaak.

Dit apparaat is alleen voor experimenteel gebruik.

Volgens Dr. Beck is het belangrijkste onderdeel van het protocol de Bloodpulse functie en wordt die functie nog eens versterkt wanneer u daarbij twee a drie maal per week een glas zilverwater consumeert. Volgens het protocol moet u dagelijks twee uur lang gedurende twee maanden met de elektroden aansluiten op uw huid en een ader "pulsen". Het apparaat is daarom draagbaar en gemakkelijk in een broekzak mee te nemen. Het snoer is flexibel en kunt u vaak gemakkelijk onder de kleding dragen zodat u zo veel mogelijk mobiel bent tijdens de behandeling.




Het protocol

Volgens Dr. Beck is het protocol voor het reinigen van het bloed als volgt:

- Twee tot driemaal per week een glas colloïdaal zilverwater consumeren (mag ook elke dag)
- Iedere dag twee uur lang bloodpulsen
- Deze behandeling gedurende twee maanden volhouden.

Wat zit er in de doos

Uw Dr. Beck protocol device wordt geleverd met de volgende onderdelen.

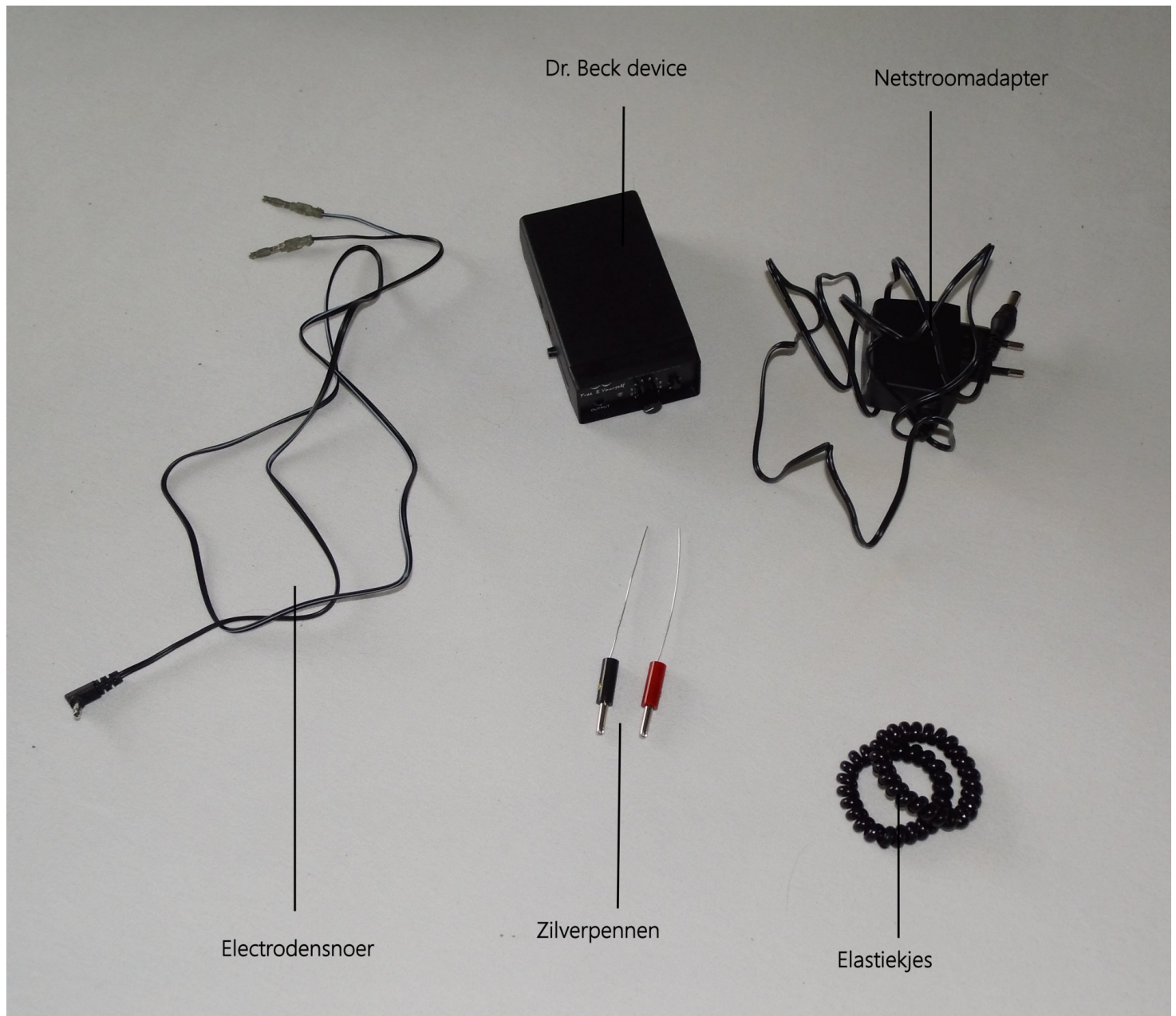

Colloïdaal Zilvergenerator





Met de zilvergenerator kunt u twee soorten zilverwater maken.

Methode 1: Met normaal leidingwater: de witte colloïdaal. Dr. Beck heeft dit water in het lab laten testen en kwam uit op 50.000 ppm, wat bijzonder sterk is. Bij deze methode ontstaat ook zilverchloride, dat volgens Wikipedia onder andere kwik uit het lichaam kan verwijderen.

Methode 2: Met gedestilleerd water: de gele colloïdaal. Dit proces duurt veel langer en de zilverconcentraties zijn veel lager. Sommige mensen maken zich zorgen over zilverchloride en prefereren deze methode.

Methode 1:

Steek de twee zilverdraad pennen (afbeeldingen op volgende pagina) in het apparaat aan de zijkant in de rode en zwarte ronde aansluitingen. Zorg ervoor dat de pennen elkaar niet raken, buig ze eventueel netjes recht. Druk op de knop naast de pennen om de zilvergenerator aan te zetten. Plaats het apparaat op een glas leidingwater. Let op dat het plastic het water niet raakt en alleen het zilverdraad in het water is.

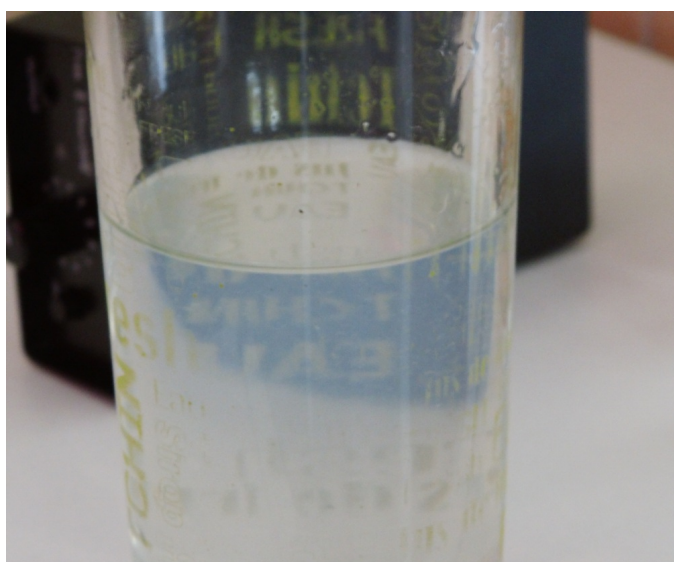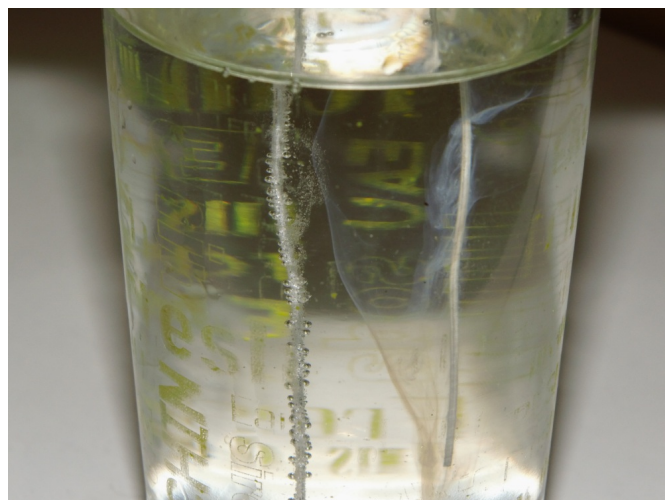


Nu ziet u een witte waas uit de pen die in de rode aansluiting zit afkomen. Op de andere pen ontstaan direct bubbeltjes. (afbeelding hierboven). Wacht ongeveer 30 seconden en zet het apparaat uit. Roer met een lepel in het water zodat het water licht troebel wordt (afbeelding hiernaast). Uw zilverwater is klaar voor consumptie.

Methode 2:


Gedestilleerd water kunt u in de meeste doe-het-zelf winkels kopen. U kunt het ook zelf maken door water te verdampen en op te vangen met een koud oppervlak. De druppels die ontstaan op het koude oppervlak zijn gedestilleerd water. Er zijn ook speciale apparaten op de markt die gedestilleerd water onbepaald kunnen maken.

Sluit meegeleverde adapter aan. Deze methode duurt lang en verbruikt veel stroom. Het kan ook met een batterij, maar dan is deze erg snel leeg.

Steek de twee zilverdraad pennen in het apparaat aan de zijkant in de rode en zwarte ronde aansluitingen. Zorg ervoor dat de pennen elkaar niet raken, buig ze eventueel netjes recht. Druk op de knop naast de pennen. Plaats het apparaat op een glas gedestilleerd water. Wacht ongeveer 15 minuten. Het water wordt lichtgeel. Zet het apparaat uit. Het zilverwater is klaar voor consumptie. De sterkte van het water is afhankelijk van de tijd die u wacht. U kunt het water sterker maken door bijvoorbeeld 30 minuten of een uur te wachten.

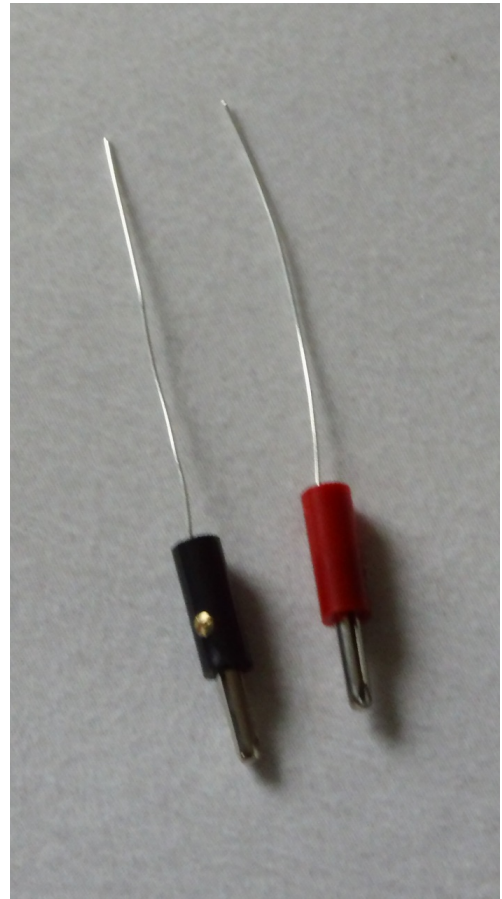**Belangrijk:**

Let bij het aansluiten van de pennen op de kleur van de ingang. Het apparaat zal zilver afsnoepen van de pen die in de rode aansluiting zit. De andere pen zal niet slijten. Na verloop van tijd kunt u de pennen omwisselen om zo een gelijkmatige slijtage bij beide pennen te veroorzaken. Op die manier gaat de set pennen het langste mee.

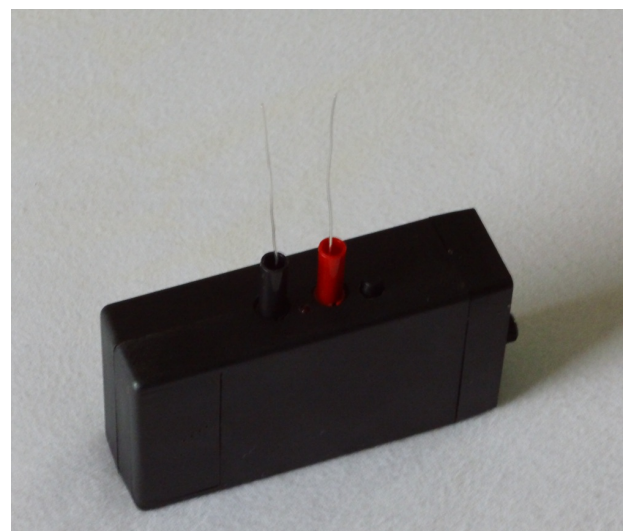

Bloodpulse

Aan de voorzijde van het apparaat vindt u de Bloodpulse functie. Hier vindt u de volgende functies.




Aansluiting electrodensnoer: "output": De ingang voor de Bloodpulse functie. Hierop sluit u het electrodensnoer van aan.

Indicator LED - Gaat knipperen wanneer de bloodpulse functie in gebruik is.

Draaiknop van 1 - 10: waarmee u de sterkte van de pulse kunt instellen.

Aan/ Uit knop "PWR": Power, met deze knop kunt u de bloodpulse functie aan en uitzetten



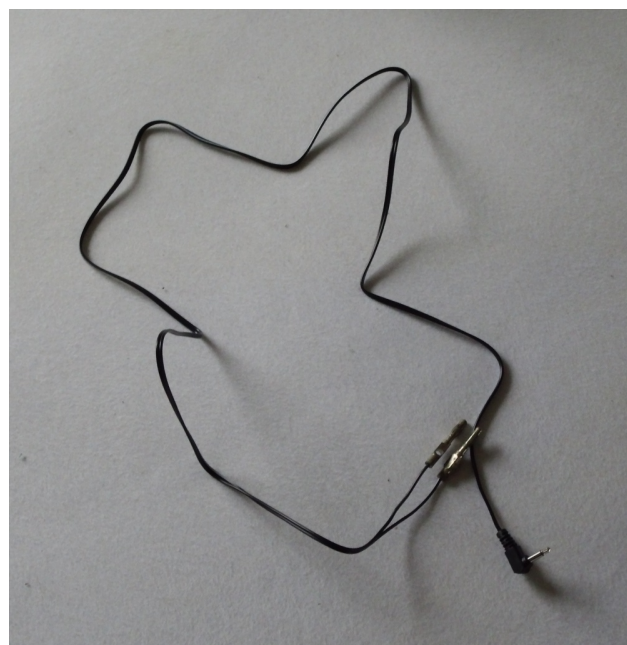


Het electrodensnoer

Gebruik:

Pak een ondiep glas en vul dat met leidingwater en maak een zoutoplossing (afbeelding hieronder): Gooi in het water een flinke hoeveelheid keukenzout (mag ook ander zout zijn). Bij roeren moet een beetje zout op de boden blijven liggen zodat u niet nog meer zout kunt oplossen in het water.


- Wikkel de elektroden in een verbandje een paar keer om. Plak het verband af met een klein stukje verbandtape (afbeeldingen hiernaast).
- De elektrode moet zo dun mogelijk zijn, zonder dat het metaal de huid raakt.
- Steek beide omwikkelde elektroden even in het glas zoutoplossing.
- Knijp de elektroden heel licht uit zodat ze niet meer druppelen.

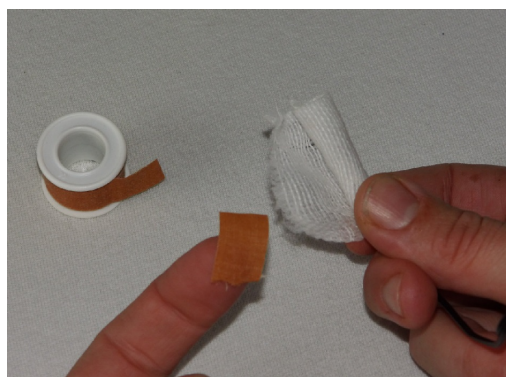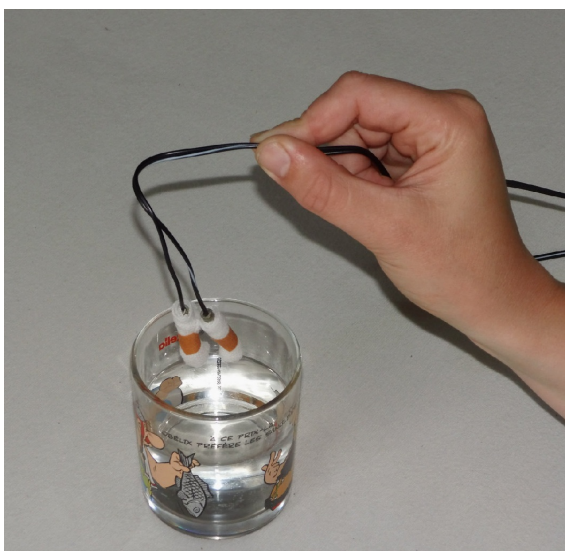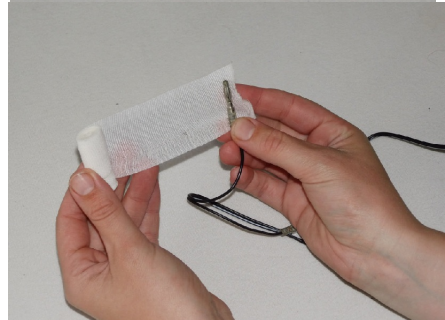

- Doe de twee elastiekjes om de pols (hiernaast).
- Steek de twee elektroden onder de elastiekjes.
- Positioneer de elektroden op de aderen van de pols zoals in de tweede afbeelding op deze pagina.
- Sluit het electrodensnoer aan op de output aan de voorkant van het apparaat. (laatste afbeelding op deze pagina)
- Zorg ervoor dat **de huid tussen** de elektroden **droog** is. Droog deze eventueel af.
- Draai de draaiknop naar stand 1
- Zet het apparaat aan met de PWR knop
- Zet de draaiknop op stand 7
- Draai nu langzaam verder richting 10 net zolang tot u het voelt kloppen (4 klopjes per seconde) in uw hand. Stel de draaiknop zo in dat het geen pijn doet, maar u wel duidelijk geklopt voelt in de hand en vingers.
- Wanneer de twee uur voorbij zijn drukt u op de PWR knop om het apparaat uit te schakelen. Daarna verwijdt u de elektroden van de pols en spoelt u het zout even af.



Positie van elektroden op de pols

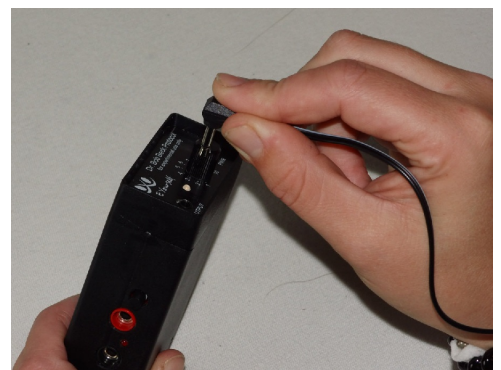

U moet twee uur pulsen dus het moet niet erg hinderlijk zijn afgesteld. Na verloop van tijd kan het meer of minder irriterend worden. Stel de draaiknop dan opnieuw in zodat u het goed blijft voelen pulsen. De pulse moet voelbaar blijven in de hand, anders bent u niet goed aan het behandelen. De elektroden kunnen ook na verloop van twintig minuten iets droger worden waardoor ze minder goed geleiden. In dat geval kunt u de elektroden opnieuw nat maken door er wat druppels water overheen te druppelen tijdens de behandeling. Let daarbij op dat de huid tussen de elektroden niet nat wordt.

Tip: U kunt het snoer ook onder uw kleding dragen, dan heeft u minder last van het snoer. Om de elektroden goed op hun plek te houden kunt u het snoer op de huid vastplakken met een pleister.

Wanneer u tijdens de behandeling geen geklop voelt:

- Kijk of de pols tussen de twee elektroden nat is en maak dit droog met een doekje.
- Probeer de elektroden iets te verschuiven om zo de ader te vinden. Wanneer u de ader heeft gevonden voelt u het geklop (tweede afbeelding op deze pagina). U kunt tijdens de behandeling met uw andere hand zonder problemen de elektroden aanraken en verplaatsen.
- Zit de plug wel helemaal ingedrukt in het apparaat.
- Doet de batterij het nog? Deze kan na twee a drie uur pulsen al leeg zijn.
- Gebruik alleen elastiek dat geen water op kan nemen en geen stroom kan geleiden.



Veiligheid


Wanneer u stuiptrekkingen in de hand krijgt en u heeft hier geen last van kan dit geen kwaad. Dit is normaal voor deze therapie. Als u het als vervelend ervaart kunt u het apparaat zachter zetten met de draaiknop totdat de stuiptrekkingen niet optreden of wel verdraagbaar zijn.

Wanneer u de tijd vergeet en u behandelt te lang dan is dat niet erg. De minimum behandeltime is twee uur per dag, maar dat mag ook gerust drie uur zijn.

Huidirritatie

Let op voor het ontstaan van **huidirritatie** op de plek waar u behandelt. Dit kan ontstaan door de stroompjes en het zoute water. De irritatie kunt u behandelen met vaseline of een ander vet huidverzorgend smeersel. Indien irritatie ontstaat de pulser aansluiten op een andere plek, bij voorkeur op de andere pols.

Zie de afbeeldingen hieronder voor verschillende mogelijkheden tot plaatsing van de elektroden. Naast op de pols (afbeelding boven) kunt u de elektroden ook aansluiten op de dezelfde ader, een stukje verderop in de arm (afbeelding onder). Ook dan moet u een duidelijk kloppende ader voelen bij behandeling.

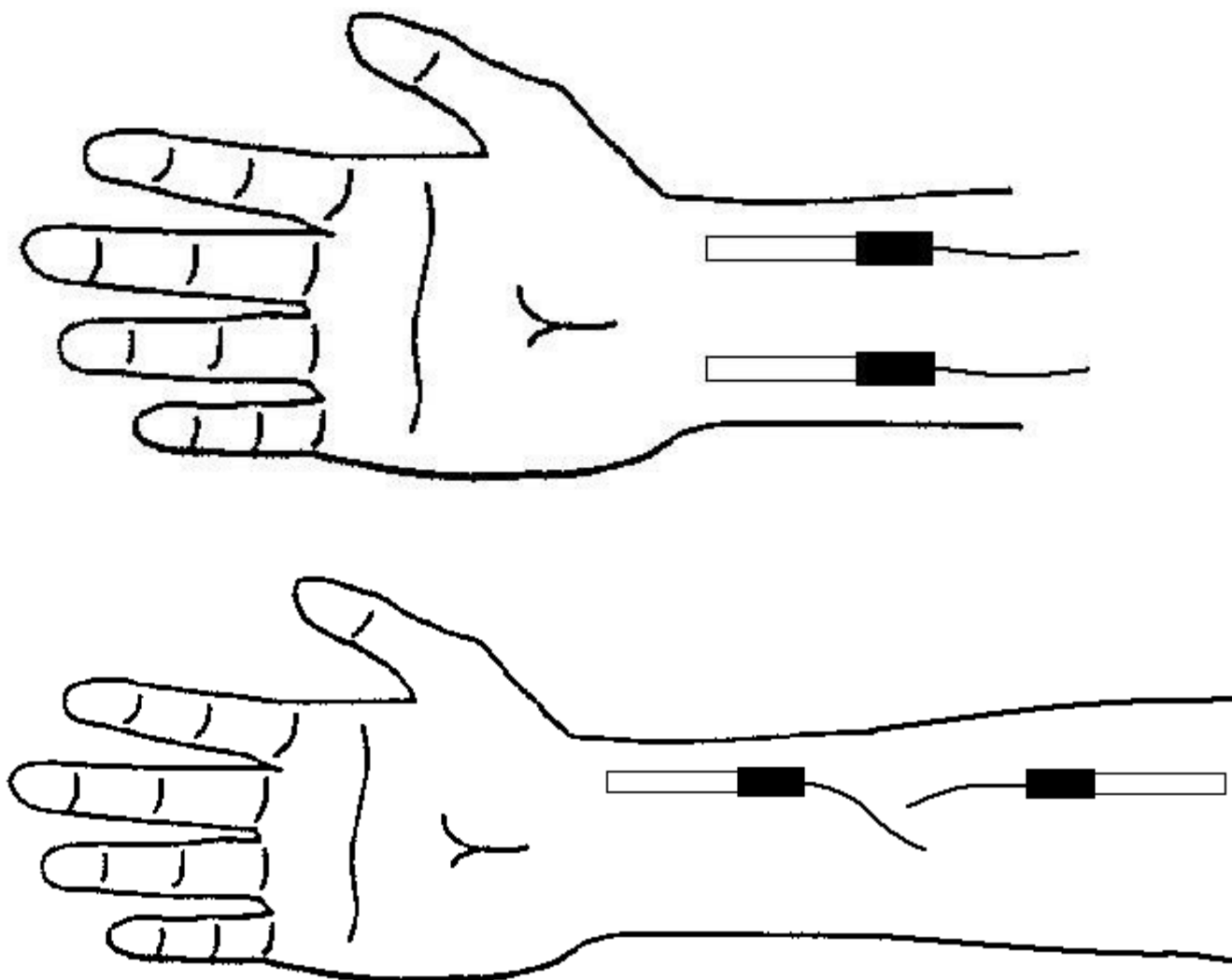

De draaiknop is belangrijk. Let erop dat u er niet per ongeluk tegenaan stoot of schuurt (bijvoorbeeld wanneer u het apparaat in de broekzak mee draagt) waardoor het apparaat pijnlijk in stand 10 terecht komt. Dit kan geen kwaad maar u schrikt waarschijnlijk. Het is maar 10 volt, maar kan als heel irritant en zelfs pijnlijk worden ervaren.

Wanneer de batterij leeg is zal de indicator LED (afbeelding hieronder) minder fel branden en zult u het pulsen ineens niet meer voelen of voelen dat de puls "wegebt". In dat geval moet u de batterij vervangen of de adapter aansluiten om verder te gaan met de therapie.

Gebruik geen andere adapter dan de meegeleverde. Deze adapter is dubbel gezekeerd en speciaal voor medisch gebruik.



Batterijgebruik

De Bloodpulse functie verbruikt vrij veel stroom en kan met een normale batterij ongeveer 6 uur pulsen. Als u zich realiseert dat u per dag twee uur moet pulsen dan doet u maar 3 dagen met een batterij. Een aantal tips:

- Gebruik de batterij alleen wanneer u echt mobiel wilt zijn. Wanneer u gaat zitten om bijvoorbeeld TV te kijken sluit dan de adapter aan. U hoeft het apparaat hiervoor niet uit te zetten: zodra u de adapter in het apparaat steekt schakelt het apparaat direct over op netstroom.
- Wanneer een batterij het niet meer doet, vervang deze dan, maar bewaar de oude batterij. Als u de batterij een tijdje laat liggen krijgt deze een deel van zijn kracht terug. Na een paar dagen kunt u opnieuw zeker een uur tot anderhalf uur pulsen met de oude batterij. Dit "trucje" kunt u met een batterij helaas niet vaker dan een of twee keer toepassen voor de batterij echt helemaal leeg is.



Vervangen van de batterij

Schuif het klepje van aan de achterkant van het apparaat open. Schud de batterij eruit door het apparaat tegen uw hand te kloppen. De batterij zit precies pas geklemd, dus er kan enig wrikken en schudden nodig zijn om hem los te krijgen. Maak de batterij los van het apparaat en klik er een nieuwe op. De batterij past maar op 1 manier in het apparaat. Als het klepje niet dichtgaat kijk dan of hij precies op de goede manier erin zit zoals in de afbeelding hieronder.



Meer informatie en updates:

www.freeyourself.com